

Електрическо загряващо одеяло

Нашето електрическо загряващо одеяло е идеално средство за облекчаване на ревматични болки или проблеми с мускулите. Ще донесе облекчение при всички видове невралгии, както и ще успокои схванатите мускули. Ще повлияе благоприятно на кръвообращението и значително ще подобри настроението ви. Незаменим за студените дни и нощи. Той ще осигури бързо и равномерно разпределение на топлината. След изваждане от контакта одеялото може да се пере в пералня

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.

Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно информацията и ръководството по-долу и ги запазете за бъдещи справки.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО:

1. По време на гаранционния период е препоръчително да запазите оригиналната опаковка и доказателство за покупка, което е и гаранционна карта в случай на рекламация. По време на транспортиране устройството трябва да бъде поставено в оригиналната му опаковка.
2. Преди първа употреба отстранете опаковката и извадете всичко отвътре.
3. Не посягайте към устройството, ако е паднало във водата, веднага го изключете от захранването.
4. Никога не използвайте устройството в близост до вана, душ или плувен басейн.
5. Не съхранявайте устройството на място, където може да влезе в контакт с вода.
6. Устройството трябва да бъде изключено от захранването веднага след употреба.
7. Устройството не може да се оставя без надзор по време на работа.
8. Деца и лица с намалена физическа или умствена работоспособност могат да използват уреда под контрола на лица, които ще гарантират тяхната безопасност.
9. Устройството и кабелът му трябва да се съхраняват далеч от деца под 8 години. Устройството не е играчка.
10. Не използвайте устройството за цели, различни от тези, за които е предназначено.
11. Преди да включите щепсела в електрически контакт, уверете се, че напрежението, посочено на табелката с данни, съответства на мрежовото напрежение в контакта. Ако напреженията не съвпадат, не свързвайте устройството.
12. Никога не използвайте аксесоари, които не са доставени с устройството и не са препоръчани от производителя.
13. Изключете устройството от контакта, като хванете щепсела, не дърпайте електрическия проводник.
14. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, смяната или ремонтът трябва да се поверят на специализиран сервиз. Не ремонтирайте уреда сами, защото

има риск от токов удар. Индивидуални намеси в устройството по време на гаранционния период ще доведат до загуба на тази гаранция.

15. Не съхранявайте и не поставяйте устройството, неговите аксесоари и кабел близо до горещи повърхности.

16. Този уред е предназначен само за домашна употреба, не го използвайте в индустриална среда или навън.

17. Съхранявайте на сухо и хладно място (0-40°C), избягвайте излагане на слънчева светлина.

18. Не докосвайте работещия уред с мокри ръце и крака.

19. Не използвайте устройството върху отворени рани, порязвания, слънчеви изгаряния или мехури.

20. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта и неговите аксесоари.

21. След употреба оставете уреда да изстине.

22. Устройството се нагрява до висока температура. Необходимо е изключително внимание по време на операцията.

23. Устройството не трябва да се използва като възглавница за домашни любимци. Съществува риск от ухапване и токов удар или смърт на животното.

24. Не го използвайте за въздушно отопление.

25. Не го слагайте под матрака.

26. Не поставяйте карфици или други остри предмети.

27. Превключвателят на модула трябва да бъде свободно достъпен. Не го покривайте със завивки, одеяла, възглавници или други предмети.

28. По време на работа не го сгъвайте, огъвайте или увивайте. Винаги го използвайте напълно разпръснат.

29. Ако уредът ще се използва в регулируемо легло, уверете се, че е напълно разширено и хранящият кабел не е притиснат или усукан.

30. Трябва редовно да проверявате физическото състояние на уреда. Ако има признаци на износване, повреда или неправилна поддръжка, преди по-нататъшна употреба, той трябва да бъде върнат на производителя.

31. Не заспивайте, когато уредът работи.

32. Не сушете в сушилня.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Електрическо одеяло
2. Свалящ се щепсел
3. Щепсел
4. Превключвател: 0 – OFF 1 – лека топлина; 2 – висока температура;
0 – ИЗКЛ.
5. Електрически проводник
6. Примки за закрепване

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. Разгънете одеялото на мястото, където ще бъде използвано. Уверете се, че е напълно разпръснат, не е огънат и превключвателят (4) е разположен в горната част близо до главата ви. Превключвателят не трябва да се покрива.
2. Одеялото има халки (6), с които може да се комбинира с матрака или леглото. Осигурява точно разтягане и обездвижване.
3. Свържете щепсела (2) с гнездото (3).
4. Свържете електрическия проводник (5) с електрическия контакт.
5. Задайте предварително загряване на най-високата позиция на крана „2“ около 30-60 минути преди употреба. Когато използвате, изберете подходящата позиция на крана „1“ или „2“ според усещането на човешкото тяло. Ако ще го използвате дълго време, моля, задайте на крана позиция „1“, която е най-ниската позиция, за да избегнете прегряване, което може да причини дискомфорт на човешкото тяло.
6. Задайте желаното ниво на нагряване:

Ниво 1 - 32°C-37°C - одеялото ще се затопли до работната температура за около 30 минути.

Ниво 2 - 40°C-45°C - одеялото ще се затопли до работната температура за около 40 минути


Ниво 3 - 50°C-60°C - одеялото ще се затопли до работната температура за около 60 минути
7. По време на работа одеялото трябва да бъде покрито, например, със завивка, за да се гарантира, че няма значителни топлинни загуби и за да се затопли правилно одеялото.
8. Изключете уреда, като преместите превключвателя (4) на позиция „0“, след което изключете от контакта.
9. Оставете да изстине.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да почистите уреда, изключете го и го извадете от електрическия контакт.

1. Малките замърсявания могат да бъдат отстранени с влажна кърпа.
2. За да почистите превключвателя, използвайте мека кърпа, навлажнена със сапунена вода.
3. Не потапяйте превключвателя във вода или друга течност.
4. Не използвайте разтворители, силни почистващи препарати и остри предмети, тъй като те могат да повредят корпуса на превключвателя.
5. Одеядото може да се пере в пералня (програма за пране на деликатни дрехи макс. до 40°C).
6. Преди пране извадете щепсела (2) от контакта (3).

За да извадите щепсела (2), повдигнете фиксатора (а) нагоре с пръста си и издърпайте щепсела (2) директно навън. Не дърпайте кабела на контролера и не се опитвайте да издърпате щепсела на контролера (2), без да повдигнете заключващия елемент (а), тъй като ще повредите гнездото (3). С такава дейност ще загубите гаранцията.

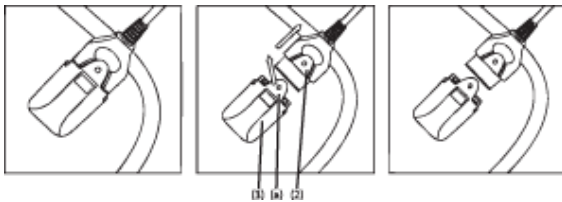

7. Не мийте с превключвател (4) или електрически проводник (5). Те трябва да бъдат изключени преди това.
8. Поставете одеядото в торбата за пране.
9. Оставете да изсъхне напълно.
10. За сушене не използвайте: сешоари, сушилни, ютии и не излагайте на слънчева светлина. Одеядото трябва да изсъхне естествено.
11. Одеядото трябва да се суши в сушилня за дрехи в разпънато положение. Не изцеждайте.
12. Изсушете добре, преди да използвате отново. Не използвайте одеядото, ако е мокро или влажно.

Технически данни:

Напрежение: 220-240V

Честота: 50-60Hz

Консумирана мощност: 60W

температура:

1. 32°C-37°C (20W)

2. 40°C-45°C (30W)

3. 50°C-60°C (60W)

Материал: 100% полиестер

Дължина на електрически кабел: 160см

Размер: 150x80см